

visuReal MASTER Update 1.6



THEMEN

Neue Features:

- 1. Multi-User-Fähigkeit**
- 2. DSGVO-konforme Speicherzeiterweiterung auf 6 Monate**

Infos zu den neuen Features

Punkt 1: Multi-User-Fähigkeit

Mehr Flexibilität im Arbeitsalltag – ab Version 1.6. können Sie den visuReal MASTER auf bis zu 15 Endgeräten gleichzeitig bedienen.

Und wie geht das? Hier kommen die Details:

1. Aufnahme und Bearbeitung:

Messbildaufnahmen können immer nur von einem Gerät gemacht werden. Aufgenommene Messungen/Messbilder können von bis zu 15 Endgeräten gleichzeitig aus bearbeitet werden. hierbei gilt „Wer zuerst kommt, malt zuerst“, d.h. das Gerät, das zuerst die Aufnahme für eine Messung startet, erhält die Rechte für die Aufnahme. Sobald die Aufnahme abgeschlossen ist, kann dasselbe oder ein anderes Gerät Aufnahmen starten und die Rechte werden erneut an das entsprechende Gerät vergeben.

2. Gerätehierarchie:

Es gibt keine Hierarchie unter den Geräten, alle haben die gleichen Berechtigungen.

3. Messungen bearbeiten:

Solange eine Messung von einem Gerät bearbeitet wird, kann diese nicht von einem anderen Gerät aus geöffnet werden. Es erfolgt eine entsprechende Hinweismeldung.

4. Automatisches Speichern von Messungen:

Können Sie eine Messung nicht fertig bearbeiten, wird diese nach 60 Sekunden Inaktivität automatisch mit der letzten Änderung gespeichert und die Software kehrt zur Startseite zurück. Inaktivität heißt, keine Messmarken werden angefasst / verändert und keine Buttons werden getippt. Die Messung kann später aus der Chronik wieder geöffnet und bearbeitet werden.

5. Zugriffsbegrenzung:

Maximal 15 Endgeräte erhalten Zugriff auf Messungen. D.h. 1 Gerät kann aufnehmen und 14 Geräte haben gleichzeitig Zugriff auf bereits vorhandene Messungen der visuReal MASTER Software. Zweiter möglicher Fall: Es können 15 Geräte auf Messungen zugreifen, ohne dass eins davon gerade eine Aufnahme startet.

Punkt 2: DSGVO-konforme Speicherzeiterweiterung auf 6 Monate

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, auch noch nach Wochen und Monaten auf Messdaten zuzugreifen und diese auszuwerten oder zu bearbeiten. Dafür gibt es die Speicherzeiterweiterung auf 6 Monate. Standardmäßig werden visuReal MASTER-Geräte mit 72 Stunden Speicherzeit ausgeliefert. Möchten Sie diese Zeit verlängern müssen Sie die dazu die entsprechende DSGVO-Erklärung aktiv bestätigen.

Und wie geht das? Hier kommen die Details:

- 1) Das Gerät muss mit dem Internet verbunden sein.
- 2) Im Hauptmenü muss der Menüpunkt „Datenschutz“ ausgewählt werden.



- 3) Eine neue Seite mit der DSGVO-Bestimmung wird angezeigt

DATA PROCESSING AGREEMENT (DPA)

The parties agree that this Data Processing Agreement ("DPA") sets forth their obligations relating to the Processing of Personal Data (as those terms are defined below) when the Customer makes use of VisuReal Master tool ("VRM"), a service provided by Hoya Holdings N.V. ("Hoya") to you ("Customer") pursuant to the terms and conditions or agreement between the Parties ("Agreement"). By continuing to use VRM, Customer agrees to abide by the terms of this DPA. In the event of a conflict between the terms set out in this DPA and any terms set out in the Agreement, this DPA shall prevail.

1. DEFINITIONS AND QUALIFICATIONS

Except where explicitly stated otherwise in this DPA, the following terms shall have the following meaning:

- **"Controller", "Personal Data Breach", "Data Subjects", "Data Supervisory Authority", "Personal Data", "Processing" and "Processor"** shall have the same meaning as set out in the GDPR.
- **"Applicable Data Protection Laws"** means all applicable laws that relate to the processing of Personal Data under this DPA including without limitation the GDPR and CCPA.
- **"GDPR"** means Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of Personal Data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Protection Regulation).
- **"CCPA"** means the California Consumer Privacy Act of 2018 (as amended), Cal. Civ. Code §§ 1798.100-1798.199 as applicable to either party and as amended, repealed, consolidated or replaced from time to time.
- **"Controller to Processor Clauses"** means, as relevant, the standard contractual clauses for the transfer of Personal Data to data processors established in third countries set out in the Commission Decision of 5 February 2010, as amended, updated, replaced, and in force from time to time.
- **"Processor to Processor Clauses"** means, as relevant, the standard contractual clauses for the transfer of Personal Data to data processors established in third countries set out in the Commission Decision of 4 June 2021, as amended, updated or replaced from time to time.
- **"Third Country"** means any country outside of the scope of the data protection laws of the

Zurück

Bestätigen

- 4) Wenn der Text der DSGVO-Bestimmungen erscheint, lesen Sie den Text vollständig und sorgfältig durch. Der Text muss nach unten gescrollt werden, damit Sie die Pflichtfelder ausfüllen können.

- 5) Pflichtfelder Ausfüllen:

- a. Firmenname
- b. Kundennummer (Hoya oder visuSolution – vom Verkauf abhängig)
- c. Name des Anwenders
- d. Seriennummer des vRM Gerätes (Wird vom System ausgelesen)



HOYA

visuReal MASTER



this DPA and the Agreement.

5. INDEMNIFICATION

Customer will indemnify and hold Hoya harmless for any claims, liabilities, costs, expenses, losses, or damages (including consequential losses, loss of profit and loss of reputation and all interest, penalties and legal and other professional costs and expenses) incurred by Hoya arising directly or indirectly from a breach of Article 4(b).

6. CHANGES IN APPLICABLE DATA PROTECTION LAWS

The parties agree to negotiate in good faith modifications to this DPA if changes are required for Hoya to continue to process the Customer Data as contemplated by this DPA in compliance with the Applicable Data Protection Laws or to address the legal interpretation of the Applicable Data Protection Laws, including (i) to comply with the GDPR or any national legislation implementing it and any guidance on the interpretation of any of their respective provisions; (ii) the Controller to Processor Clauses or any other mechanisms or findings of adequacy are invalidated or amended, or (iii) if changes to the membership status of a country in the European Union or the European Economic Area require such modification.

7. TERM

This DPA is entered into and will remain in force until complete deletion or complete return of all Customer Data to Customer in compliance with this DPA.

8. LAW AND JURISDICTION

This DPA and any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of or in connection with it or its subject matter or formation shall be governed by and construed in all respects in accordance with the laws of Netherlands and shall be deemed to have been made in the Netherlands, and each party hereby submits to the jurisdiction of the courts of the Netherlands.

My company name

My customer number


My name

Serial number of visuReal Master

Zurück

Bestätigen

- 6) Wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, bestätigen Sie die DSGVO-Bestimmung. Diese Bestätigung wird an den visuReal MASTER Server gesendet.
- 7) Sie erhalten die Nachricht, dass die 6 Monate Speicherzeit aktiviert wurden.

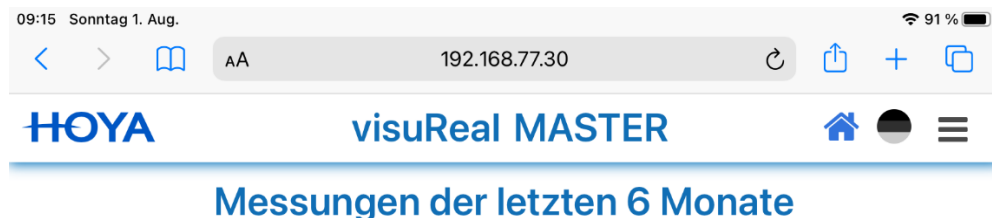

Weitere wichtige Hinweise dazu:

- Die DSGVO-Bestimmung für die Hoya-Softwareversion erscheint derzeit ausschließlich in englischer Sprache.
- Sobald Sie der DSGVO-Bestimmung zugestimmt haben, können Sie die Zustimmung über den visuReal MASTER nicht mehr rückgängig machen. Möchten Sie Ihre Zustimmung widerrufen, müssen Sie das schriftlich (per E-Mail) an visuSolution oder Hoya kommunizieren. Die Deaktivierung der verlängerten Speicherzeit erfolgt per Fernwartung im Auftrag von visuSolution. Über den Erfolg der Zurückstellung werden Sie nachträglich von Hoya/visuSolution informiert.
- Bei einer Rücknahme des Gerätes vom Kunden durch Hoya muss die verlängerte Speicherzeit deaktiviert werden, bevor das Gerät wieder an einem anderen Kunden / Augenoptiker verkauft / ausgeliehen wird.
- Es wird nicht empfohlen, die Speicherzeiterweiterung auf Ersatzgeräten/Tauschgeräten zu aktivieren.
- Im Falle eines Rechtsstreits kann das bestätigte DSGVO-Dokument bei der visuSolution oder Hoya Global angefordert werden.



+49 (0) 39361 - 967 – 17




hotline@visuSolution.com



Lüderitzer Weg 6 39517 Tangerhütte OT Brunkau, Germany



www.visuSolution.com

Designed and developed by  Ollendorf[®]